

## INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL PEDI-MATE PLUS – FERNO


### Cos'è il Pedi-Mate Plus Ferno?

Il Pedi-Mate Plus Ferno è un dispositivo progettato per il trasporto sicuro dei bambini (fra i 4,5 e i 45,4 kg) su barelle.



### Preparazione del Dispositivo:


Prima di utilizzare il Pedi-Mate Plus, è importante assicurarsi che sia in buone condizioni. Verificare che non ci siano strappi, danni o segni di usura sulle cinghie e sulle fibbie. Assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente. Una volta effettuati questi controlli, posizionare il Pedi-Mate Plus sulla barella in modo che sia ben allineato e pronto per l'uso.

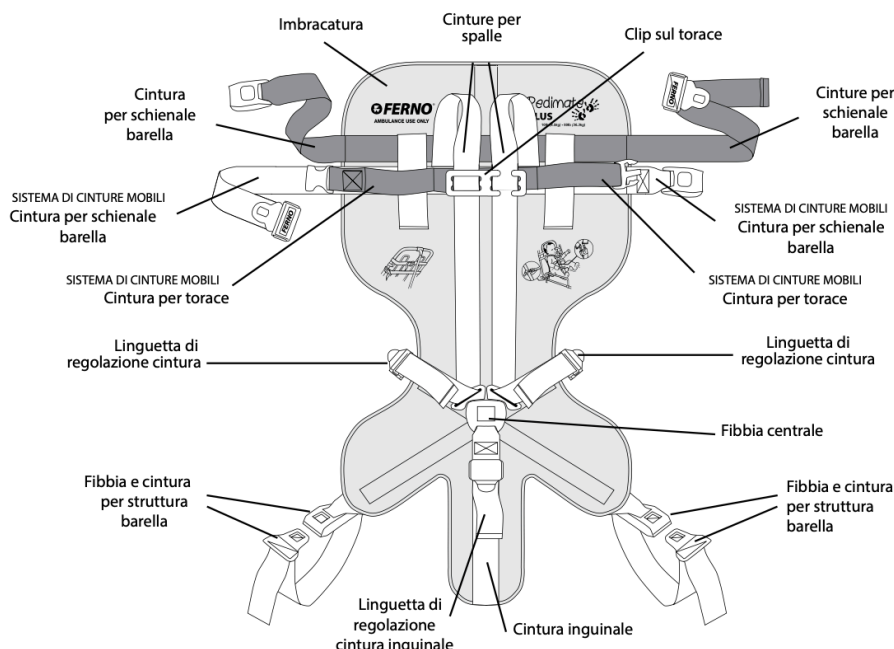


## UTILIZZO SU BARELLE FERNO

### Posizionamento del Pedi-Mate PLUS

1. Rimuovere le eventuali cinture fissate alla barella.
2. Sollevare lo schienale e bloccarlo a un'angolazione compresa fra 15 e 45 gradi. In questo modo le spalle del paziente saranno più in alto del bacino e sarà garantito il baricentro corretto.
3. Srotolare il Pedi-Mate PLUS e distenderlo sul materasso della barella con tutte le cinture aperte.

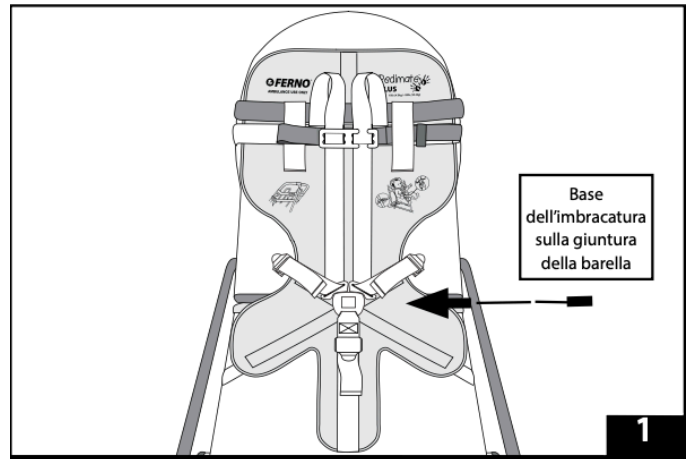

4. Accertarsi che l'imbracatura sia centrata sul materasso.
5. Posizionare l'imbracatura in modo che la sua base, dove si siederà il paziente, coincida con la giuntura della barella (figura 1). La cintura nera per lo schienale deve trovarsi nell'area in cui si prevede di poggiare le spalle del paziente.
6. Passare le due estremità della cintura attorno allo schienale finché non si incontrano, quindi agganciare la fibbia. Lasciare un po' di gioco per consentire eventuali regolazioni successive.

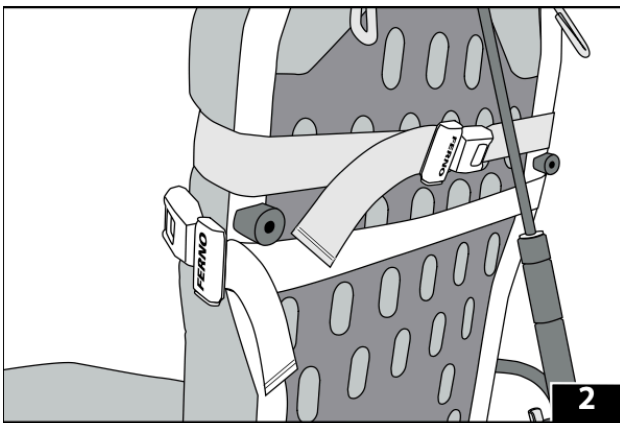


7. Posizionare il sistema di cinture mobili grigie e nere nel punto in cui si prevede la presenza del torace del paziente.

8. Passare le estremità del sistema di cinture mobili attorno allo schienale della barella finché non si incrociano sul lato, quindi agganciare la fibbia (figura 2). Lasciare un po' di gioco per consentire qualche aggiustamento successivo.

### Fissaggio del Pedi-Mate PLUS

1. Posizionare il paziente sul Pedi-Mate PLUS. Se la cintura nera dello schienale non è all'altezza delle spalle, sistemare la posizione dell'imbracatura.
2. Con l'imbracatura ben posizionata, stringere la cintura dello schienale tirando con forza l'estremità libera fino a comprimere il materasso.
3. Assicurare una delle cinture per la struttura facendo passare l'estremità con l'aggancio fra la struttura della barella e il materasso, vicino all'attacco delle sponde laterali lato testa.
4. Avvolgere la cintura attorno alla struttura e agganciarla (figura 3). Lasciare un po' di gioco per consentire eventuali regolazioni successive.
5. Ripetere l'operazione dall'altro lato.
6. Stringere le due cinture della struttura tenendo ferma la fibbia con una mano e tirando con forza l'estremità libera con l'altra.

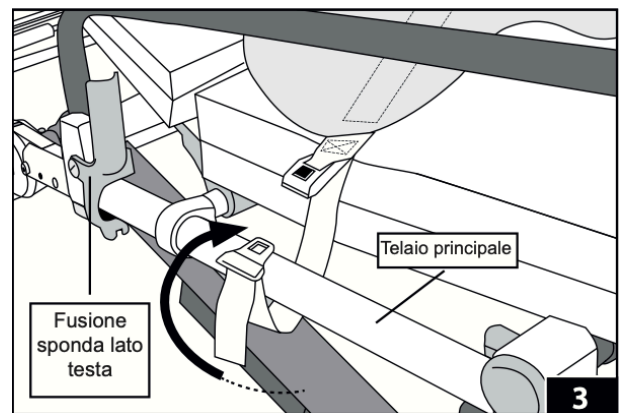

### Posizionamento del paziente

1. Far passare la fibbia della cintura inguinale tra le gambe del paziente e appoggiarla sull'addome.
2. Sistemare la cintura per il torace del sistema di cinture mobili grigie e nere attorno al petto del paziente e allacciarla sotto alle cinture delle spalle. Per stringerla tirare l'estremità libera, lasciando lo spazio necessario per la respirazione.
3. Sollevare una delle cinture per le spalle sopra alla spalla del paziente. Infilare il braccio del paziente nella cintura, poi agganciare la fibbia a metà della fibbia centrale (figura 4).
4. Ripetere l'operazione per l'altra spalla.
5. Infilare la cintura per la spalla a sinistra del paziente nella clip del torace (figura 5), quindi far scorrere la clip verso l'alto o fino a posizionarla al di sopra della cintura nera del torace.

### **Verifica della Sicurezza:**

Prima di iniziare il trasporto, è fondamentale controllare che tutte le cinghie siano ben fissate e che le fibbie siano chiuse correttamente. Assicurarsi che il bambino sia comodo e che le cinghie non siano né troppo strette né troppo allentate. Inoltre, verificare che il Pedi-Mate Plus sia ben ancorato alla barella per evitare movimenti durante il trasporto.

### **Rimozione del Dispositivo:**

Sganciare delicatamente le fibbie e allentare le cinghie per sollevare e rimuovere il bambino.

### **Manutenzione Regolare:**

Per mantenere il Pedi-Mate Plus in condizioni ottimali, è necessario disinfettarlo e pulirlo regolarmente. Verificare periodicamente lo stato delle cinghie e delle fibbie. Infine, conservare il dispositivo in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore eccessive o umidità.

Seguendo queste indicazioni, è possibile utilizzare il Pedi-Mate Plus Ferno in modo sicuro ed efficace, garantendo la sicurezza e il comfort del bambino durante il trasporto in situazioni di emergenza.

### **RIFERIMENTI:**

- Manuale d'uso Pedi-Mate Plus Modello 678, Ferno, 00106 v02 201702

Per quanto riguarda barelle diverse dai modelli Ferno, si ritengono valide le indicazioni sopra fornite. Di seguito, è possibile trovare delle immagini esemplificative dei vari punti di fissaggio alle barelle in uso presso il *Comitato di Trento*.

### ESEMPIO UTILIZZO SU BARELLA MEBER





## ESEMPIO UTILIZZO SU BARELLA STRYKER



## ESEMPIO UTILIZZO SU BARELLA MEDIROL



Il Direttore Sanitario,  
Dott. Francesco Mattedi



*Francesco Mattedi*