

APPUNTI

CANALI RADIO

- Canale 3 : Emergenza
- Canale 6 : Programmati
- Canale 7 : Elicottero

22533 - SINTONIZZARE LA RADIO DELL'AMBULANZA SULLA RADIO PORTATILE O LA FISSA IN SEDE

- Sul display della radio in ambulanza sono presenti due numeri, quello di sinistra indica su quale radio trasmette la chiamata (01 quella fissa in sede, o 53 che sono gli ultimi due numeri scritti sulla radio portatile), quello di destra indica il canale (per esempio 03: emergenze)
- Per cambiare radio sulla quale girare la chiamata:
 - Premere cancelletto sul terminale della radio in ambulanza per selezionare il numero di sinistra sulla tastiera digitare il numero della radio (01 o 53)
 - Si tenga presente che se si vuole cambiare canale bisogna cambiare sia il canale sulla portatile che su quella in ambulanza.

22531 - SINTONIZZARE LA RADIO DELL'AMBULANZA SULLA RADIO PORTATILE O LA FISSA IN SEDE


- ❖ Accendere l'apparato radio (pulsante in alto a destra)
- ❖ Premere il pulsante "menu (linea continua verticale in basso)" tre (3) volte per arrivare alla schermata menu "IMMETTI ID / DIGITA ID"
- ❖ Digitare le ultime due cifre della selettiva (è il numero riportato sulla radio portatile) su cui si vuole "inoltrare la chiamata" (es.01 (fissa-ufficio) /51 (portatile) /52...)
- ❖ Premere il pulsante "menu" per dare conferma;
- ❖ Premere il pulsante rosso per uscire.

COMUNICAZIONE CON LA CENTRALE

- Premo il tasto relativo alla Selettiva e Aspetto risposta dalla centrale.
- Ricevuto risposta dalla centrale premo pulsante di sinistra, aspetto 1 secondo e avvio la comunicazione



CRITERI PER OSSIGENOTERAPIA PRECOCE

- ❖ Politrauma
- ❖ Arresto cardiaco
- ❖ FR>30 atti/min o FR<10 atti/min **con** Saturazione<90% o non rilevabile
- ❖ Compromissione in atto delle vie respiratorie
- ❖ **Cosa Fare ?**
 - Posizionare maschera con reservoir
 - Somministrare ossigeno con flusso di 15 litri/min
 - Contattare COE

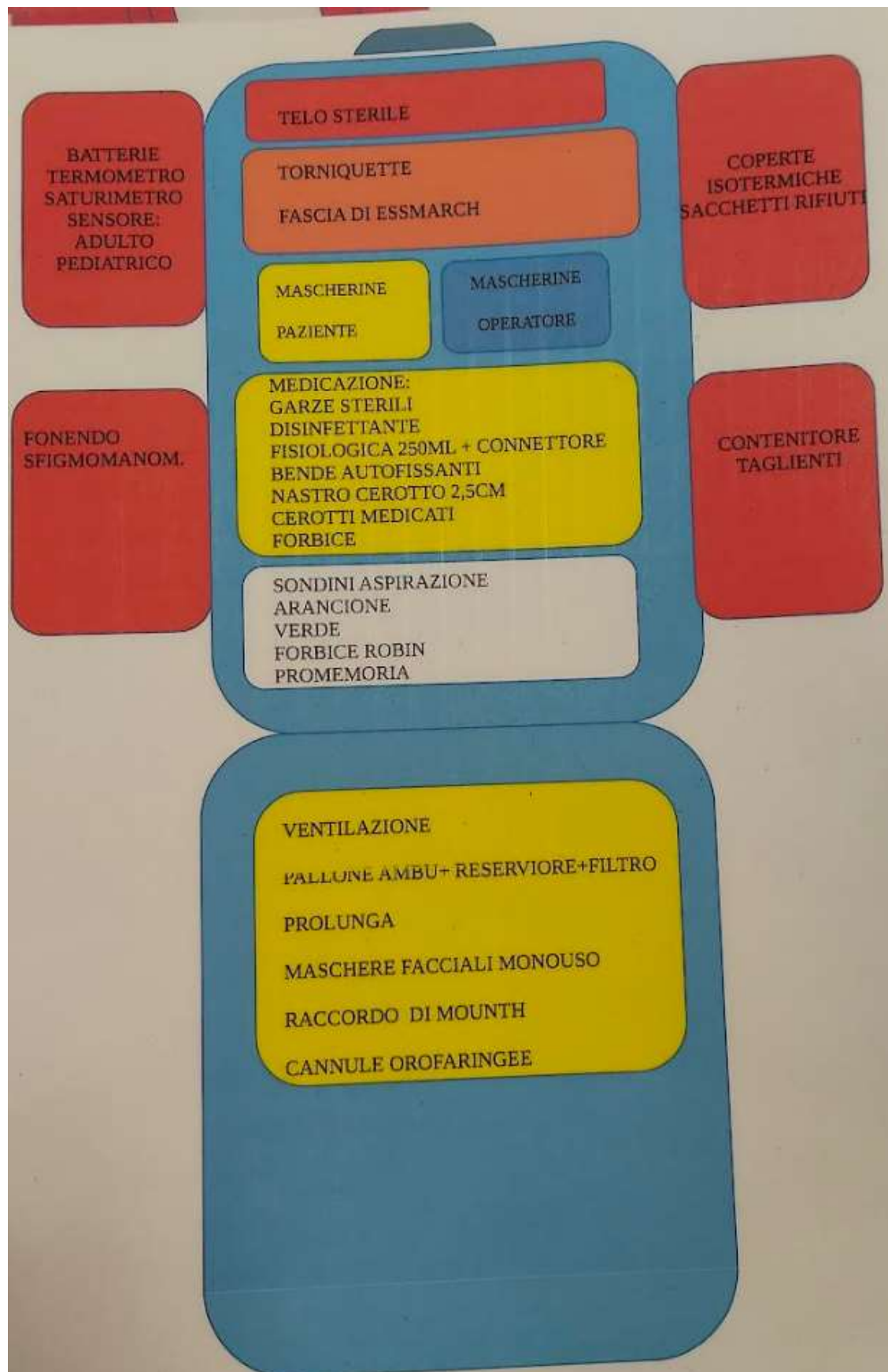




SCOOP-DISPOSIZIONE CINGHIE

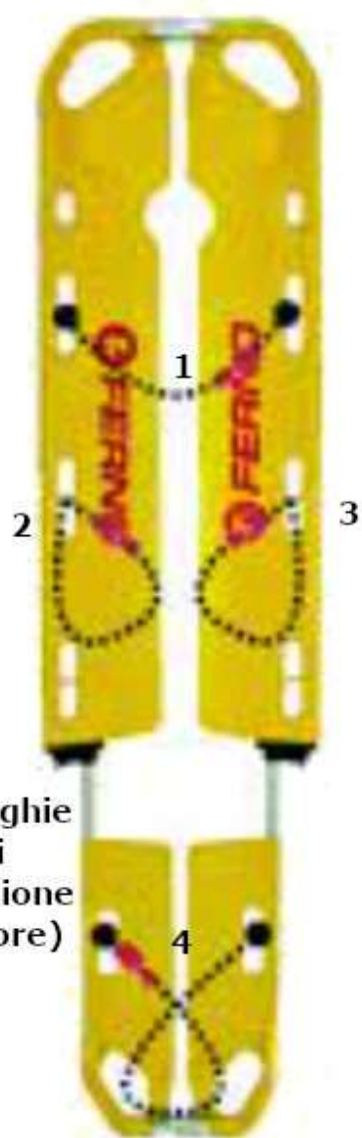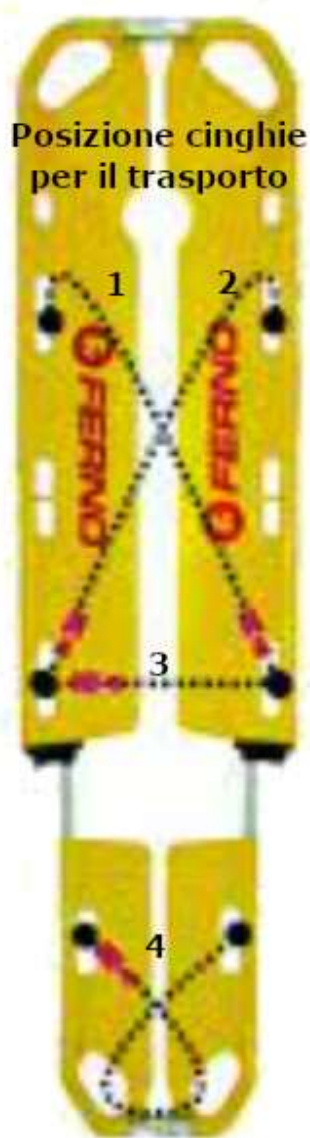

MASCHERA VENTURI

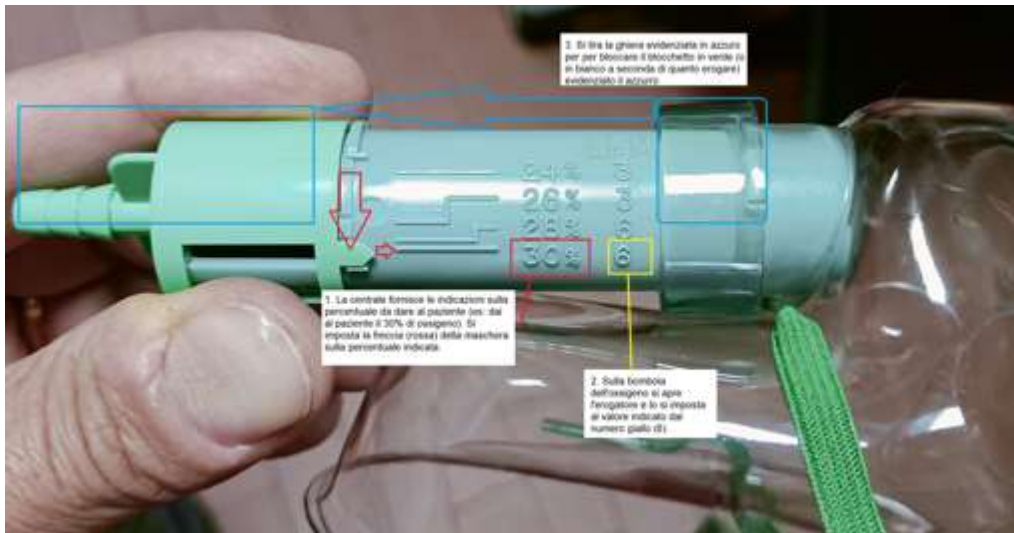

PASSAGGIO CONSEGNE – METODO SBAR

- ❖ **S** : Situazione
 - Presentarsi
 - Identificare paziente e luogo
 - Qual è o sembra essere il problema
 - Quick look
- ❖ **B** : Background. Anamnesi, Contesto
 - Informazioni su patologie pregresse
 - Terapie del paziente
 - Allergie
- ❖ **A** : Assesment. Valutazione ABCDE
 - A: Vie aeree
 - B: Respirazione (OPACS)
 - C: Circolazione (PAO, FC, Colorito)
 - D: SVDN, Glicemia
 - E: Valutazione globale, dolore, raccolta dati
- ❖ **R** : Raccomandazioni. Pianificazione
 - Eventuali richieste alla centrale
 - Supporto (sanitario avanzato, vvf, cc, altro)
 - Eventuale centralizzazione

ZOLL

Appena si accende va in modalità dae. Premere pausa per silenziarlo

Per fare ECG:

- Selezionare il tasto 12

- Collegare gli elettodi- Inserire i dati del paziente (iniziali cognome e nome) e gli ultimi 6 numeri del codice missione,
- Chiedere al paziente di chiudere gli occhi e stare tranquillo
- Quando vediamo che vengono rappresentate le linee sul display premere il tasto acquisizione (il primo in alto a sinistra , quello sopra il tasto 12)
- Una volta acquisito il tracciato compare il tasto con la busta per inviare.

Nota: Si tenga presente che quando si inseriscono i dati del paziente bisogna premere save per passare al campo successivo."